




XE-AlphaN **Sistema Automatizado de Hematologia**

Poder da automação para pequenos laboratórios

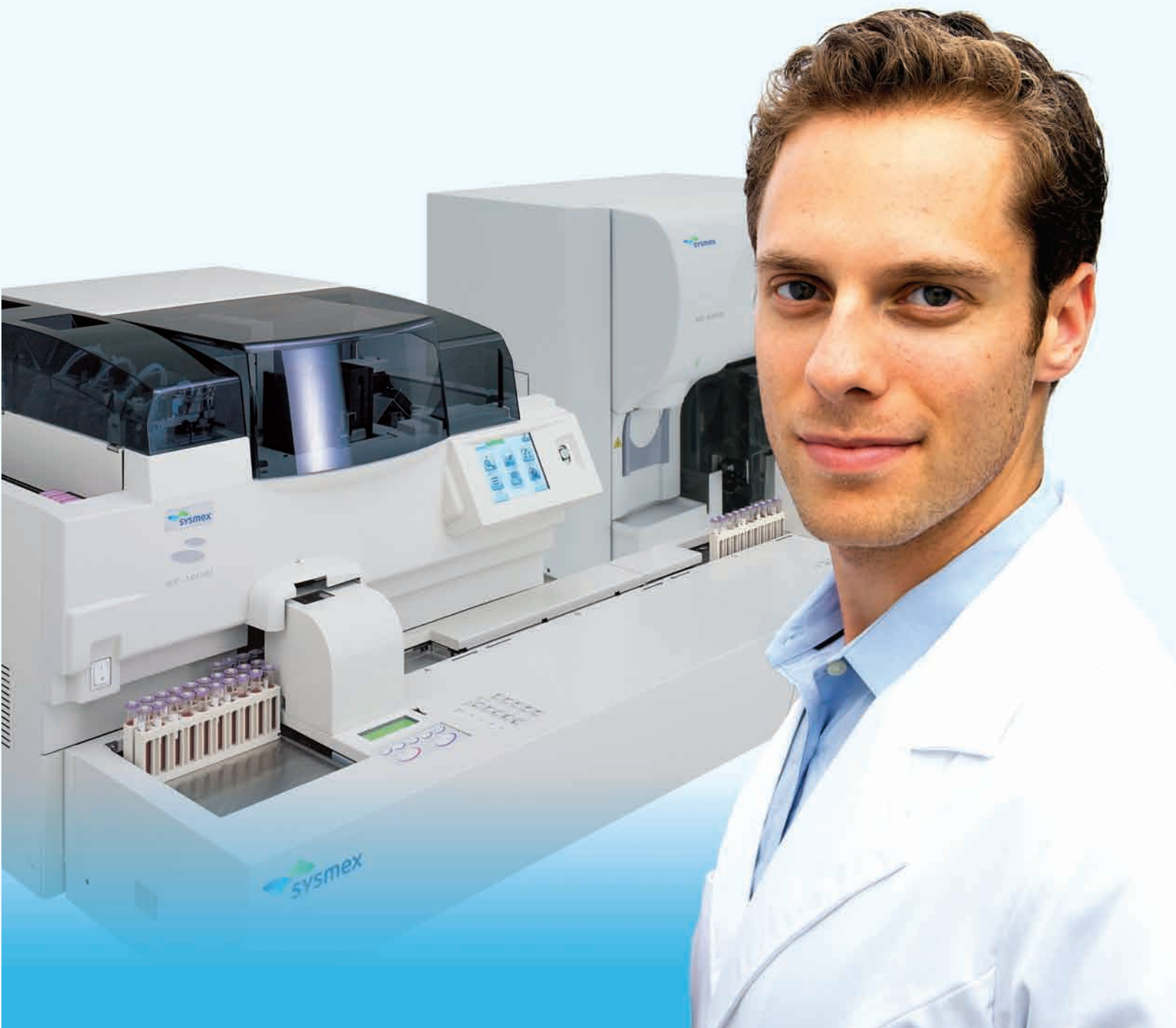

Solução compacta em automação

Automação para pequenos laboratórios, combinando a tecnologia de ponta da Sysmex em hematologia e um módulo de terceira geração para preparo e coloração de lâminas.

Melhore o desempenho clínico, operacional e financeiro com o poder da tecnologia avançada e da automação.

- Tecnologia consagrada da Série XE
- Poder da citometria de fluxo fluorescente e do foco hidrodinâmico
- Sensibilidade para contar e diferenciar vários tipos de células em amostras de sangue total e outros líquidos biológicos
- Plataforma de automação confiável para pequenos laboratórios
 - Automação que proporciona flexibilidade crucial
 - Os analisadores XE e SP-1000i podem ser usados como sistema integrado ou de modo independente



Equipamento XE-AlphaN

SP-1000i – Sistema avançado para preparo e coloração de lâminas

Unidade totalmente automatizada e integrada para preparo e coloração de lâminas - esfregaços de alta qualidade com consistência e confiabilidade



Múltiplas opções de identificação do paciente


- Identificação visual das lâminas de urgência (STAT) para maior agilidade na contagem diferencial
- Exclusiva unidade de análise de microamostras que garante, automaticamente, a qualidade uniforme das lâminas nos casos de amostras de baixo volume ou de difícil coleta
- Preparo inteligente de lâminas - Só é aspirado o sangue das amostras que necessitam de lâmina. Com isso é utilizado um menor volume de amostra.
- Sistema exclusivo de coloração que mantém a qualidade e estabilidade da lâmina corada. Dessa forma a confecção dos esfregaços sanguíneos se mantém padronizados ao longo do tempo resultando em um menor desperdício de corante por evaporação.
- Múltiplas opções de identificação do paciente, que são impressas diretamente na lâmina, gerando código de barras uni- ou bidimensional com texto legível.
- Menu e botão de ajuda integrados, intuitivos e de fácil utilização
- Manutenção automatizada e autônoma, comandada por mensagens simples e claras, de fácil utilização e com mais eficiência.
- O SP-1000i ajusta automaticamente o ângulo, a rapidez da extensora e o volume de sangue dependendo do hematócrito (HCT) do paciente. Tal diferencial garante lâminas sempre uniformes.



Diferenciação visual de lâminas de urgência (STAT)



Exclusiva unidade de análise de microamostras

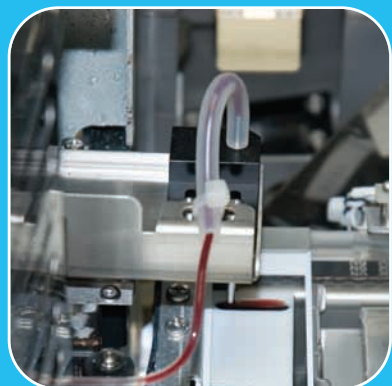

Autoajuste do ângulo da extensora



Sistema exclusivo de aplicação do corante que reduz desperdício

XE-AlphaN Especificações

Sistema

XE-AlphaN

Equipamentos

1 analisador Série XE

1 SP-1000i

Rendimento

Até 150/hora na Série XE

Até 120 lâminas/hora no AlphaN

Dimensões (LxP)

87.7" x 41" [223 cm x 104 cm]

Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
Tel. +81 (78) 265-0521
Fax +81 (78) 265-0530
www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.
One Nelson C. White Pkwy,
Mundelein, IL 60060, U.S.A.
Tel. +1 (847) 996-4500
Fax +1 (847) 996-4397
www.sysmex.com/usa

Sysmex Canada, Inc.
5045 Oribitor Drive,
Building 9, Suite 401
Mississauga, ON, L4W 4Y4, Canada
Tel. +1 (905) 366-7900
Fax +1 (905) 366-7899
www.sysmex.ca

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Joaquim Nabuco, 615 - Bairro Cidade Jardim,
São José dos Pinhais
Paraná - Brasil - CEP 83040-210
Tel. +55 (41) 2104-1314
Fax +55 (41) 2104-1300
www.sysmex.com.br

Sysmex Europe GMBH
Bornbarch 1, 22848,
Norderstedt, Germany
Tel. +49 (40) 52726-0
Fax +49 (40) 52726-100
www.sysmex-europe.com

Sysmex Deutschland GMBH
Bornbarch 1, 22848,
Norderstedt, Germany
Tel. +49 (40) 5341020
Fax +49 (40) 5232302
www.sysmex.de

Sysmex UK, Ltd.
Sysmex House, Garamond Drive, Wymbush
Milton Keynes, Buckinghamshire, Mk8 8DF, U.K.
Tel. +44 (870) 9029270
Fax +44 (870) 9029211
www.sysmex.co.uk

Sysmex Asia Pacific PTE, Ltd.
2 Woodlands Sector 1, #01-06 Woodlands Spectrum,
Singapore 738068, Singapore
Tel. +65 (6221) 3629
Fax +65 (6221) 3687
www.sysmex-ap.com

Sysmex Shanghai, Ltd.
9th Floor, Azia Center,
1233 Lujiazui Road, Shanghai, 200120, China
Tel. +21 (6886) 3300
Fax +21 (6886) 3355
www.sysmex.com.cn



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests, controlled sources and
recycled wood or fiber
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002987
© 1996 Forest Stewardship Council